


دستگاه مینی هایفو ۳ کاره

MINI HIFU 3 IN 1

HIFU | RF | EMS

لیفت، فرم دهی و جوانسازی پوست
در یک دستگاه

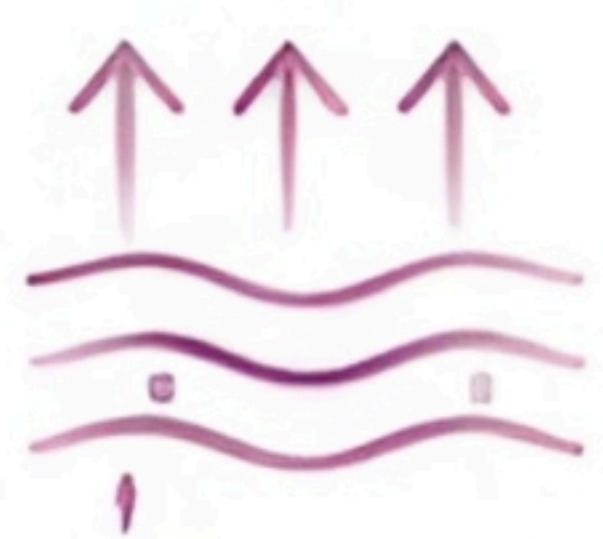

کمک به لیفت
و سفت شدن پوست



کمک به تحریک
کلاژن سازی



بهبود فرم صورت
و خط فک



جوانسازی و افزایش
استحکام پوست



مزایای دستگاه

مینای هافو ۳ کاره

تکنولوژی پیشرفته برای لیفت، فرم‌دهی و جوانسازی پوست



لیفت پوست

کمک به بالا کشیدن و سفت شدن پوست صورت و گردن



افزایش استحکام پوست

کمک به تقویت ساختار پوست و بهبود خاصیت ارتجاعی



تحریک کلاژن‌سازی

کمک به تحریک تولید کلاژن و کاهش چین و چروک‌ها



بهبود فرم صورت و خط فک

کمک به فرم‌دهی عضلات و بهبود کانتور چهره



بدون نیاز به دوره نقاهت

غیرتهاجمی، ایمن و بدون درد با قابلیت بازگشت سریع به فعالیت روزانه



قابل استفاده در منزل

طراحی سبک، ارگونومیک و مناسب برای استفاده شخصی و خانگی



ایمن و مطمئن

تکنولوژی به‌روز و استانداردهای ایمنی بالا



کاربری آسان

دارای پنل هوشمند و عملکرد راحت



سبک و قابل حمل

طراحی کم‌حجم مناسب استفاده در منزل و سفر



کیفیت تضمین‌شده

ساخته شده با متریال باکیفیت و طول عمر بالا



مشخصات فنی دستگاه

میني هايفو ۳ کاره

HIFU | RF | EMS

MINI HIFU 3 IN 1

HIFU | RF | EMS



تکنولوژی ۳ کاره

HIFU + RF + EMS
سه فناوری پیشرفته
در یک دستگاه



۵ سطح انرژی

تنظیم شدت انرژی
در ۵ سطح مختلف



نمایشگر دیجیتال

LCD Digital Display
صفحه نمایش واضح و هوشمند



نور درمانی LED

دارای نور قرمز
برای افزایش اثربخشی



شارژر از طریق USB

شارژر آسان و سریع
با کابل USB



نواحی قابل استفاده

مناسب برای صورت، گردن
و ناحیه غبغب

ویژگی	مشخصات
	فناوری HIFU (Focused Ultrasound)
	فناوری RF (Radio Frequency)
	فناوری EMS (Electrical Muscle Stimulation)
	تعداد مدها 3 (HIFU , RF , EMS)
	سطح انرژی 5 قابل تنظیم (Level)
	نمایشگر LCD Digital Display
	منبع تغذیه USB Charging (5V / 1A)
	ظرفیت باتری 1200mAh
	زمان شارژ حدود 2 تا 3 ساعت
	زمان استفاده حدود 90 تا 120 دقیقه (بسته به سطح انرژی)
	جنس بدنه ABS + PC
	ابعاد دستگاه 175 × 54 × 46 mm
	وزن حدود 175 گرم
	رنگ سفید رزگلد
	کاربرد لیفت، فرم‌دهی و جوانسازی پوست صورت و گردن



سبک و قابل حمل

طراحی سبک و کوچک
مناسب استفاده روزانه



طراحی ارگونومیک

راحت در دست و مناسب
برای استفاده طولانی مدت



استفاده آسان

کاربری ساده
با یک دکمه



مناسب استفاده شخصی

ایده‌آل برای مراقبت
شخصی در منزل

روش استفاده از دستگاه


فقط در ۴ مرحله

مسیر حرکت پیشنهادی دستگاه



پیشانی

حرکت به سمت بالا
و به طرفین

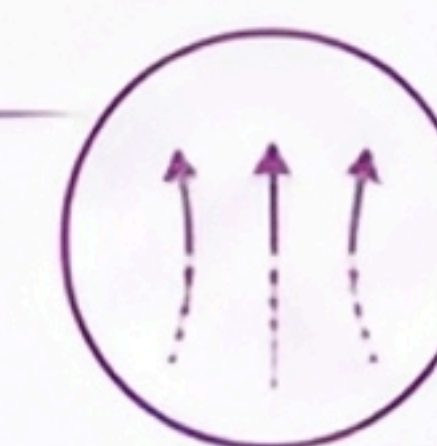

گونه ها

حرکت به سمت بالا
و خارج




خط فک

حرکت از چانه به سمت
گوش



گردن

حرکت به سمت بالا
از پایین به بالا

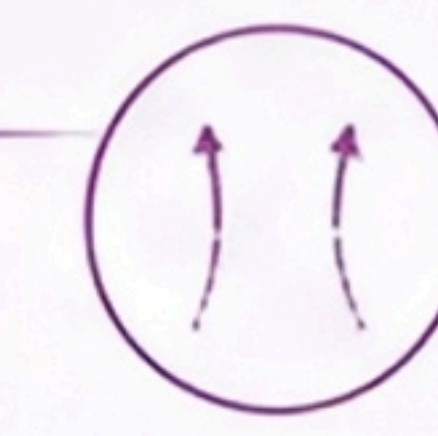

ایمن و موثر

با تکنولوژی پیشرفته
و استانداردهای ایمنی بالا



سبک و قابل حمل

طراحی ارگونومیک
مناسب استفاده روزانه



قابل استفاده
در منزل

بدون نیاز به مراجعه
به کلینیک

1

پاکسازی پوست

پوست را کاملاً تمیز کرده و
آرایش، چربی و آلودگی‌ها را پاک کنید.



2

استفاده از ژل رسانا

لایه مناسبی از ژل رسانا
روی ناحیه مورد نظر بزنید.



3

انتخاب مود درمانی

HIFU RF EMS

متناسب با نیاز پوست انتخاب شود.



4

حرکت دستگاه روی پوست

دستگاه را به آرامی و به صورت مداوم
روی پوست حرکت دهید.
از توقف طولانی روی یک نقطه خودداری کنید.



پیشنهاد استفاده



۲ تا ۳ جلسه
در هفته



هر جلسه
۱۵ تا ۲۰ دقیقه



استفاده منظم
نتیجه بهتر

نکات مهم



دستگاه را فقط همراه
ژل رسانا استفاده کنید.



روی زخم باز، پوست ملتهب
یا دارای عفونت استفاده نشود.

موارد منع مصرف و نکات ایمنی

MINI HIFU 3 IN 1

HIFU | RF | EMS

استفاده صحیح از دستگاه، ضامن بهترین نتیجه و بالاترین ایمنی است.

موارد منع مصرف ⚠️



بارداری

استفاده در دوران بارداری توصیه نمی‌شود.



پیس‌میکر قلبی

افراد دارای ضربان‌ساز قلبی از دستگاه استفاده نکنند.



صرع

در افراد مبتلا به صرع با نظر پزشک استفاده شود.



ایمیلنت فلزی

در نواحی دارای ایمیلند فلزی استفاده نشود.



زخم باز

روی زخم باز، بخیه یا ناحیه آسیب‌دیده استفاده نشود.



التهاب یا عفونت فعال

در صورت التهاب شدید یا عفونت پوستی استفاده نشود.



نکات ایمنی ✓



استفاده از ژل رسانا

همیشه از ژل رسانا استفاده کنید.



حرکت مداوم دستگاه

دستگاه را به آرامی و به صورت مداوم روی پوست حرکت دهید. از توقف روی یک نقطه خودداری کنید.



پوست تمیز

قبل از استفاده، پوست را کاملاً تمیز و خشک کنید.



استفاده از ضدآفتاب

بعد از استفاده، از ضدآفتاب با SPF مناسب استفاده کنید.



توصیه تخصصی ثین شین ✨

در صورت داشتن بیماری زمینه‌ای، بارداری، ایمیلنت فلزی یا انجام اقدامات زیبایی اخیر، قبل از استفاده با مشاور پوست یا پزشک خود مشورت نمایید.



هیچ محصولی بد نیست؛ اگر درست انتخاب شود.

ما کنار شما هستیم تا بهترین انتخاب را
با اطمینان و آگاهی تجربه کنید.

ثنا شریف

مشاور تخصصی پوست

“
برای انتخاب
بهترین دستگاه
متناسب با نیاز
پوستان، با ما در
ارتباط باشید.

مشاوره تخصصی قبل از خرید

تحلیل نیاز پوست شما و پیشنهاد
بهترین دستگاه متناسب با هدف شما.

آموزش نحوه استفاده

آموزش کامل و حرفه‌ای نحوه استفاده
برای دستیابی به بهترین نتیجه.

پشتیبانی پس از خرید

پشتیبانی و همراهی ما در تمام مراحل
استفاده از دستگاه.

انتخاب صحیح محصول

انتخاب هوشمندانه، نتیجه بهتر
و رضایت بیشتر.



www.siinshiin.com



0913 782 3923



@siin.shiin.shop